


# 計測：体積や表面積を知りたい


v1.36 版

連続領域を指定し、領域の体積や表面積などを測定することができます。


レンダリング方式をサーフェイスにしたら [メインコントロール] の [連続領域測定] を開きます。

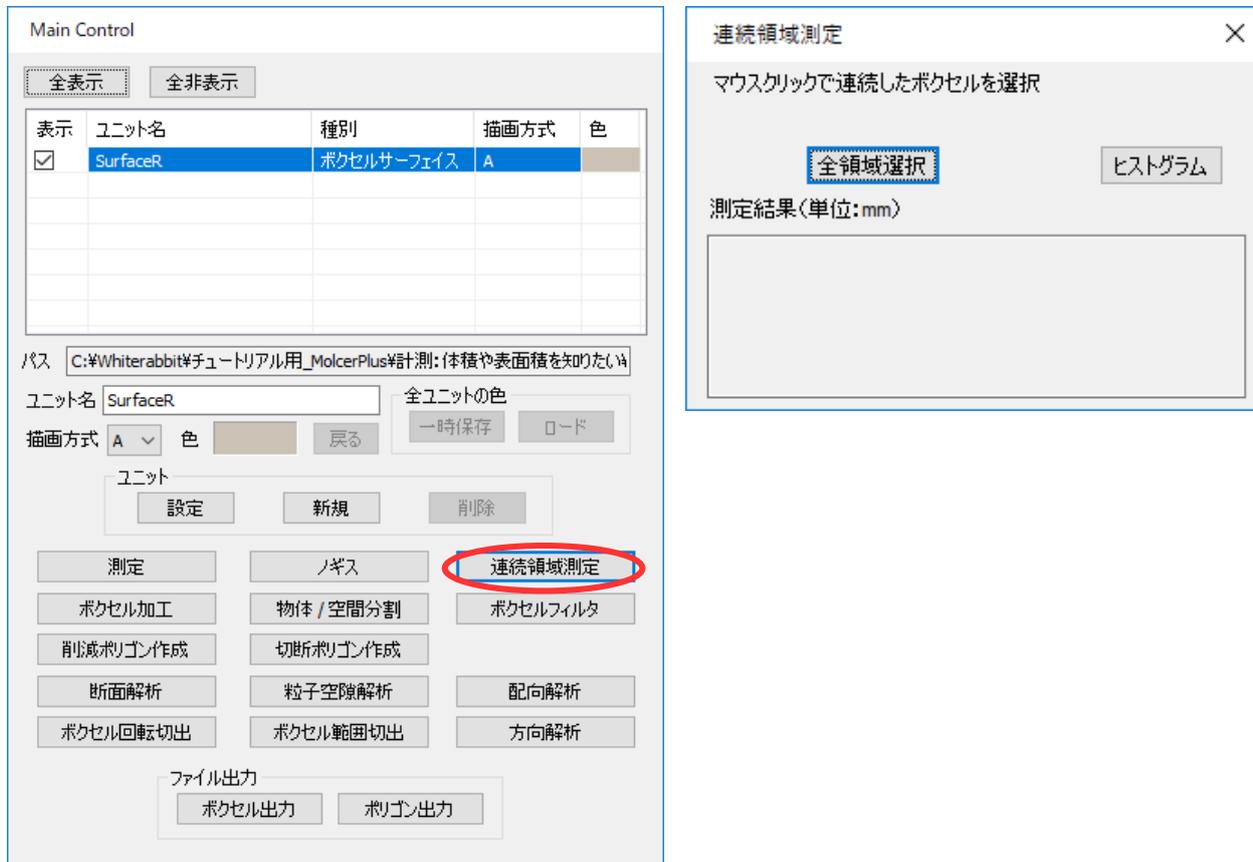

選択したい連続領域上をクリックします。

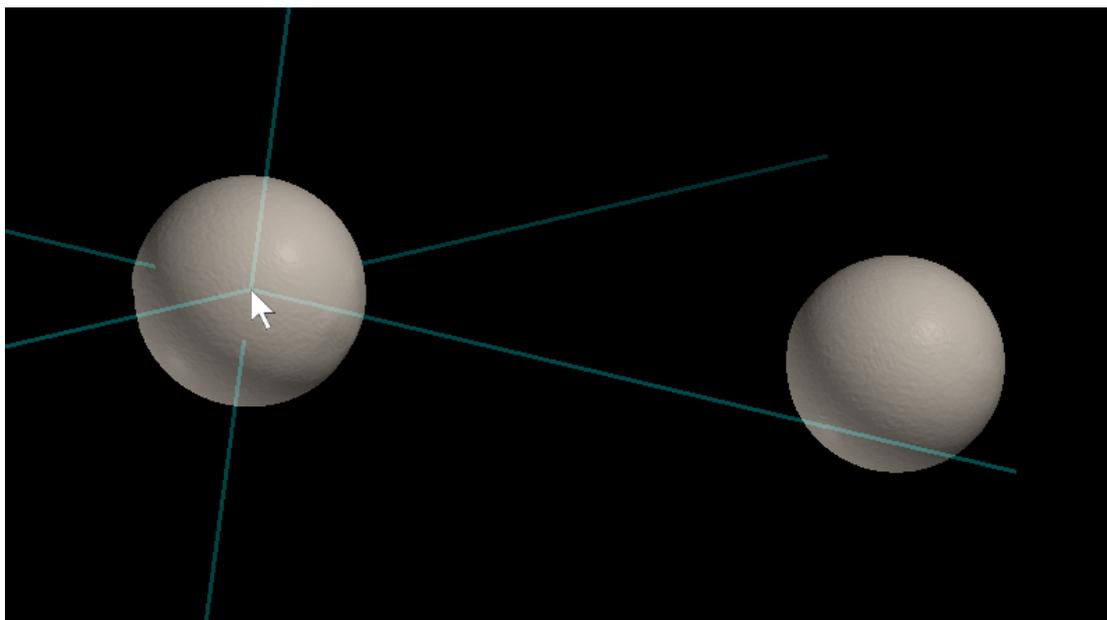

連続領域が選択され、[連続領域測定] に [測定結果] が表示されました。

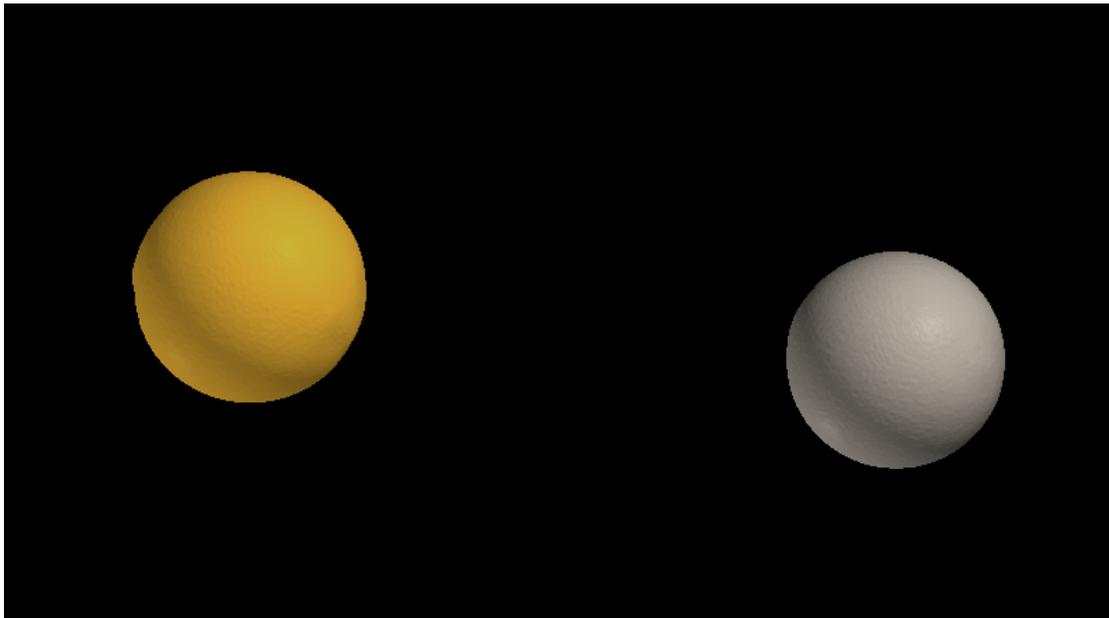

連続領域測定 ×

マウスクリックで連続領域を選択

測定結果(単位:mm)

ボクセル値平均 = 86.9837  
ボクセル値標準偏差 = 6.71616  
ボクセル数 = 3229387  
体積 = 183164.480246, 表面積 = 101665.853653  
重心 = -13.4602, -2.97056, 21.7468  
等しい体積を持つ球の半径 = 35.2304