


CTデータをきれいにしよう

v1.36 版

unnecessary parts or noise can be removed.


Rendering method is set to Surface, and [Voxel Processing] is opened from [Main Control].

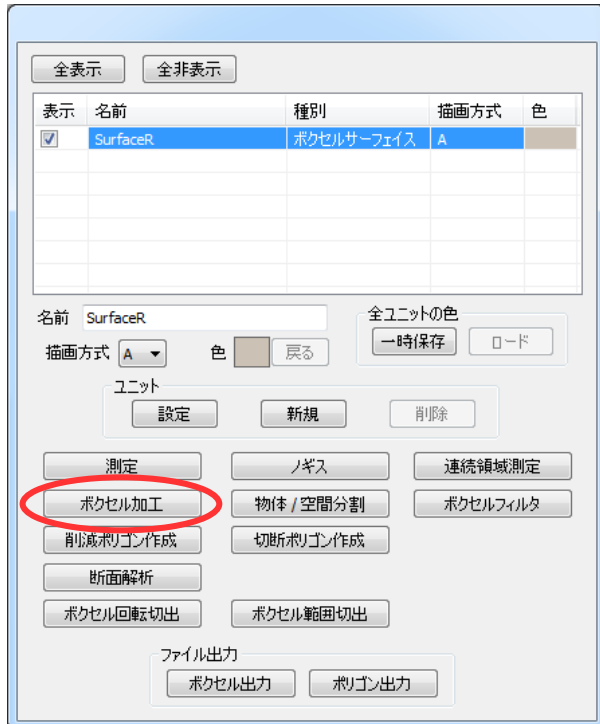


[Continuous Area Operation] is selected.




必要な領域をクリックします。

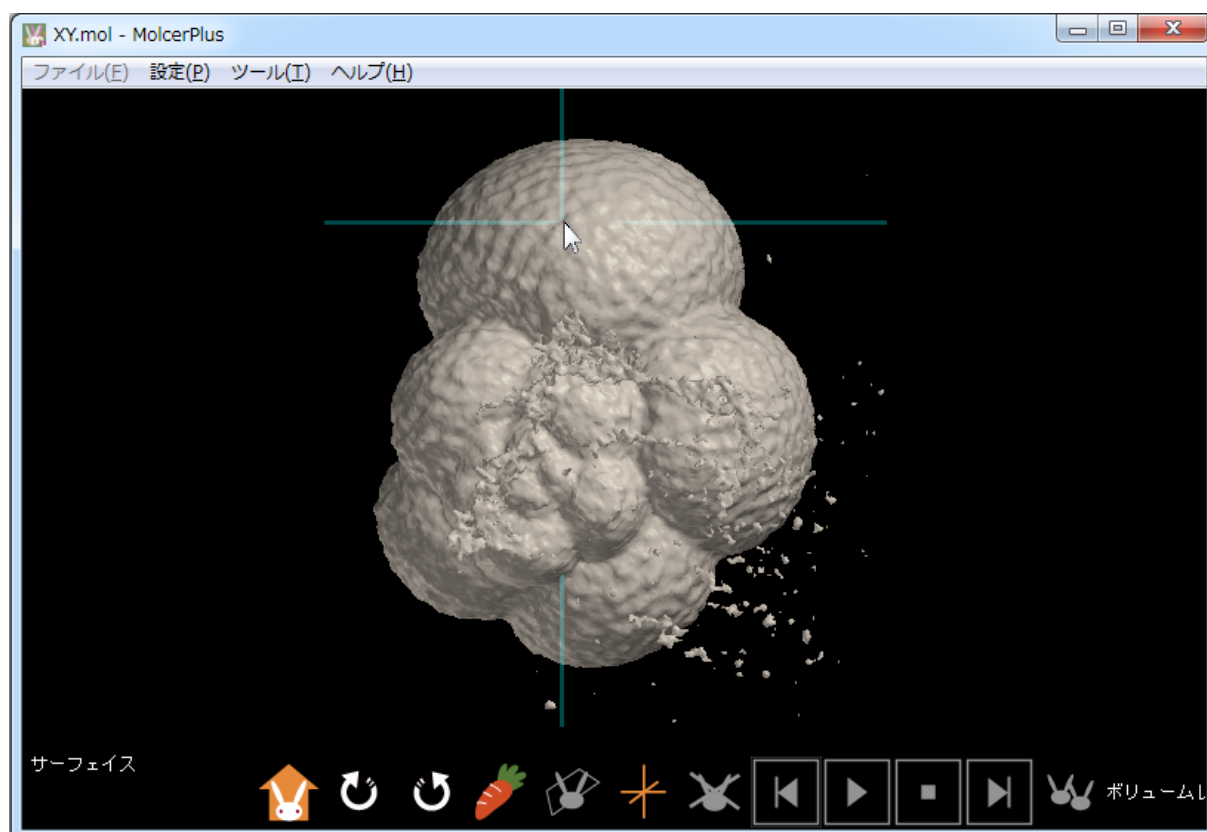


必要な領域が選択されました。

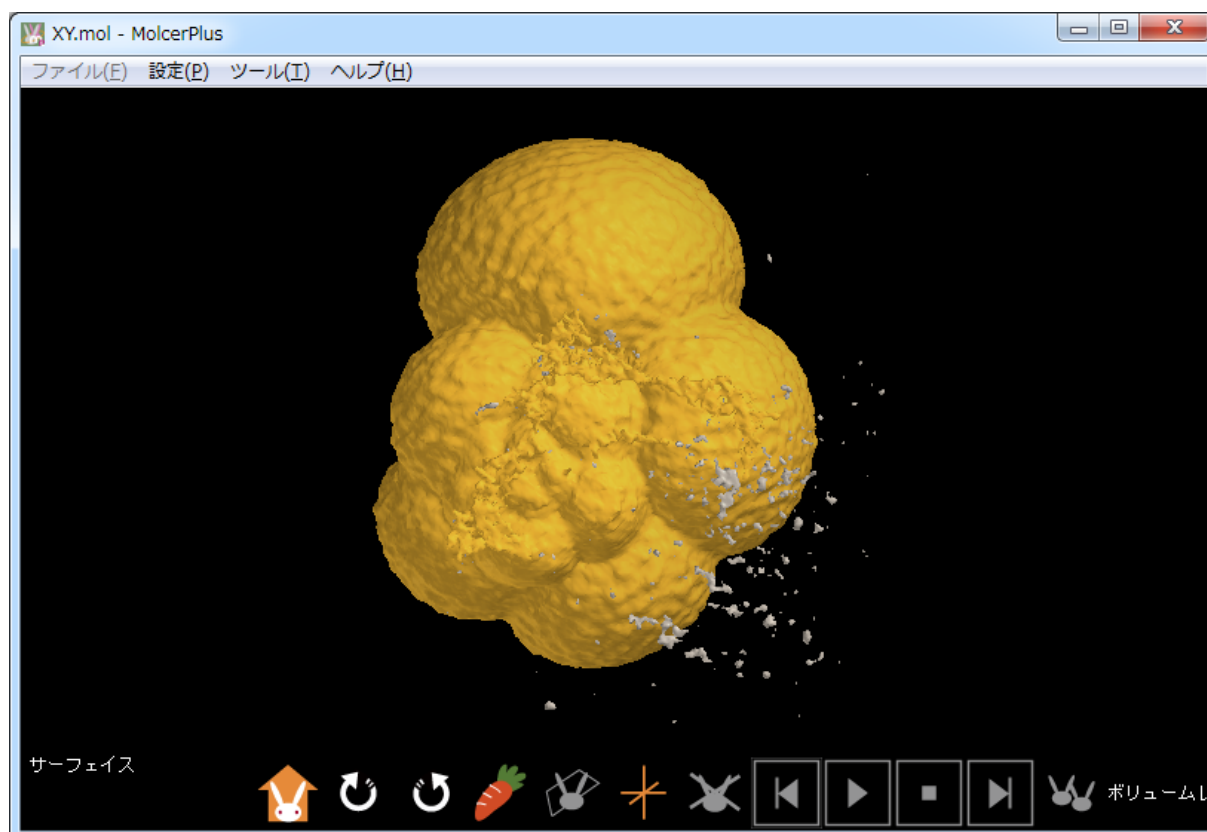


[選択領域以外を削除] を実行します。

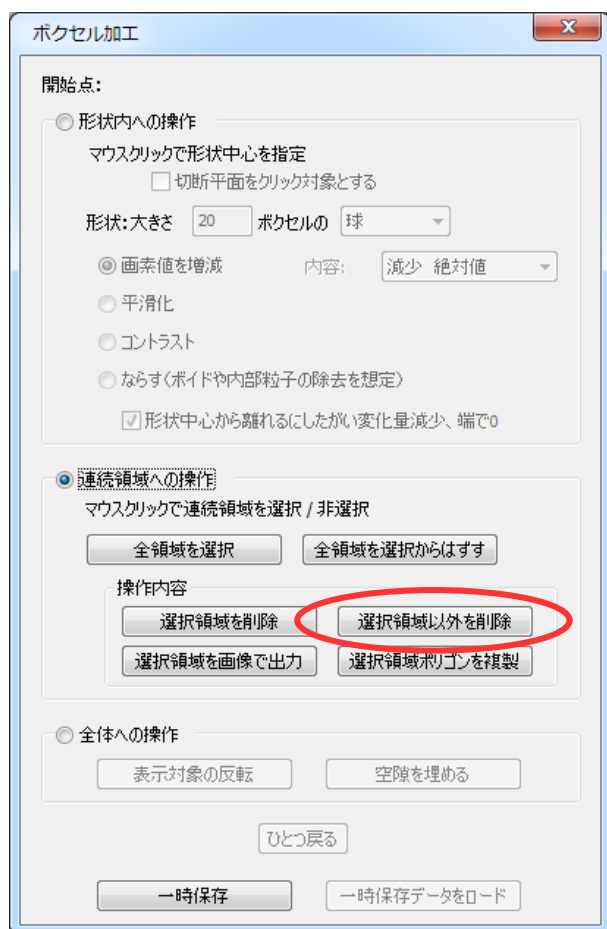


選択領域以外が削除され、ノイズが軽減しました。

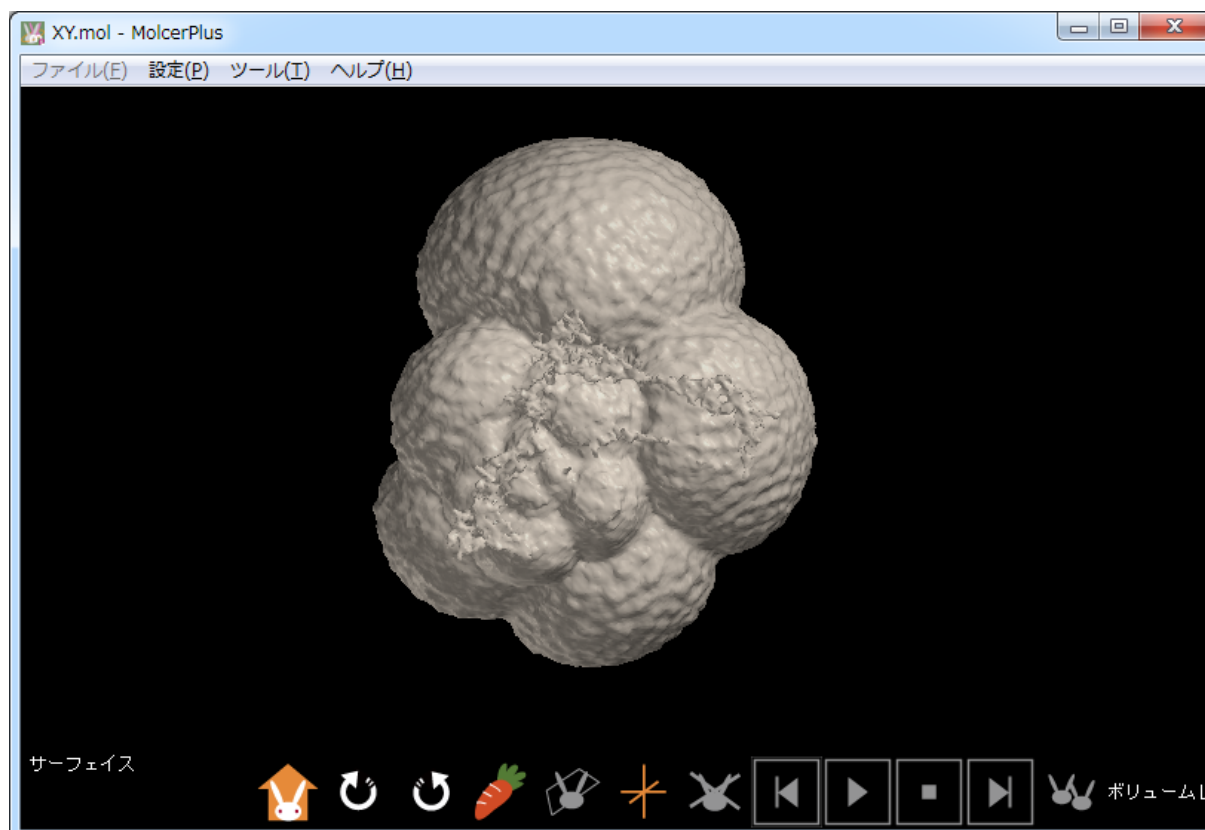


[形状内への操作] を選択したのち、形状の大きさ、ボクセルの形、[画素値の増減] の内容と変化量、[形状中心から離れるにしたがい変化量減少、端で0] のチェックの有無を指定します。

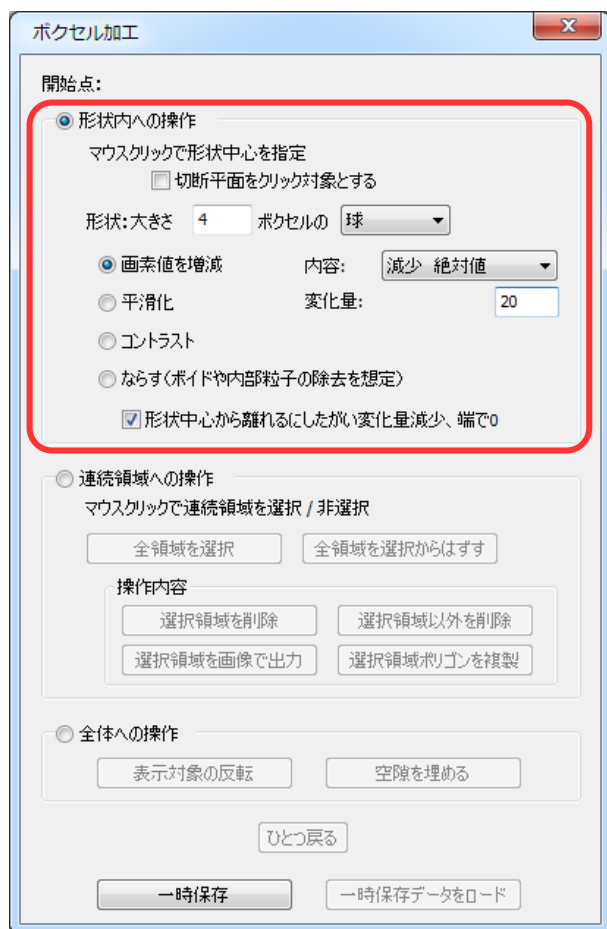



除去できなかったノイズと観察したいCTデータの接合部（赤矢印）をクリックして、切り離します。

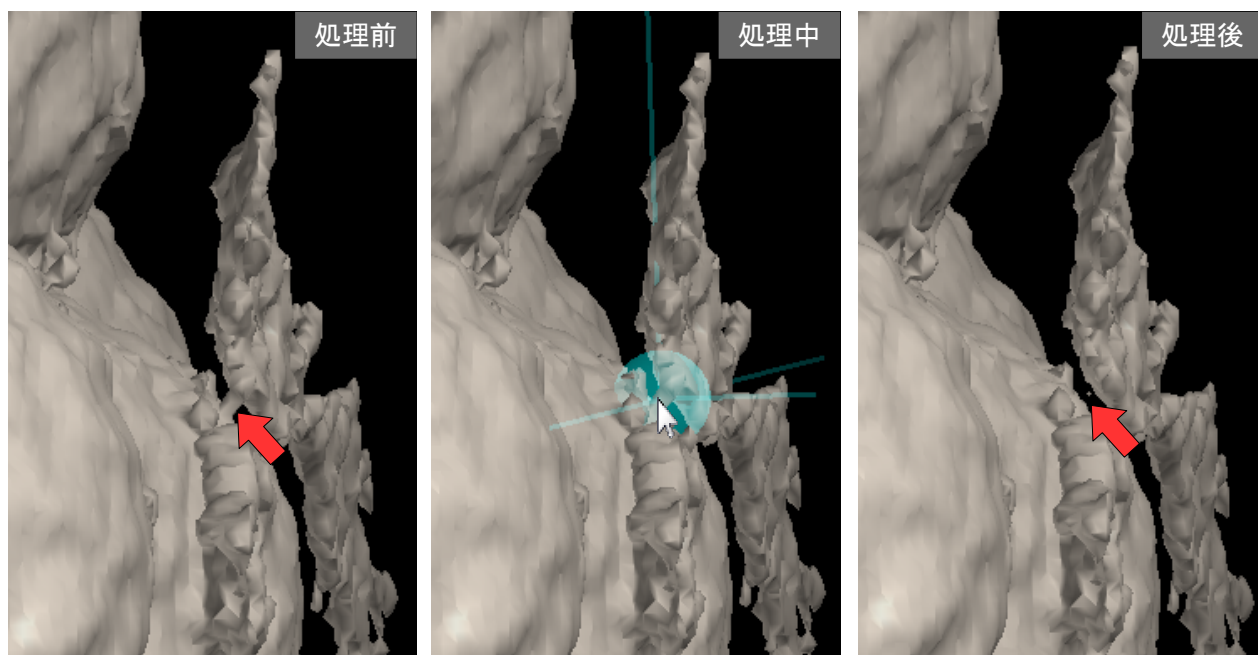

再度 [連続領域への操作] を選択したのち、必要な領域をクリックし、[選択領域以外を削除] を実行します。

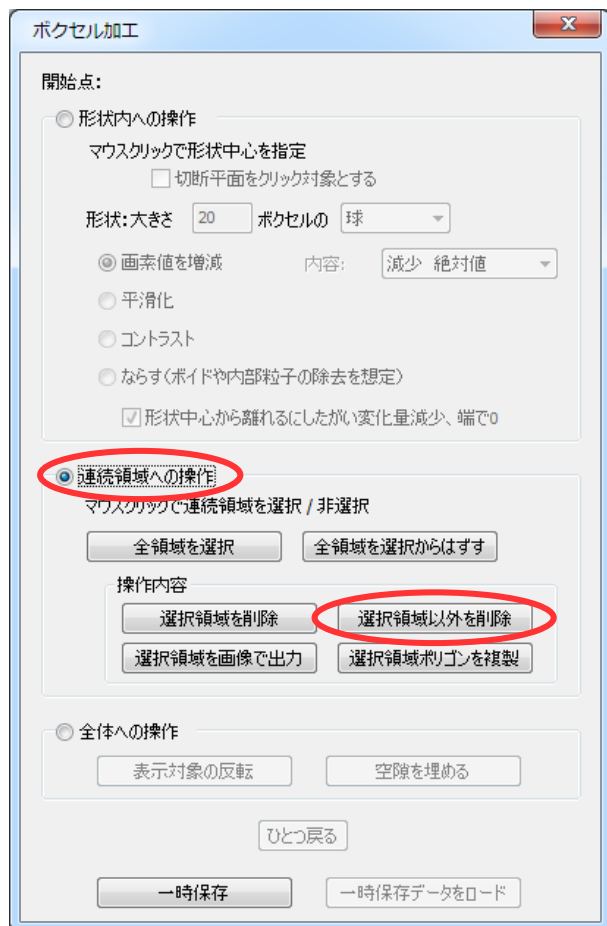

切り離れたノイズを削除することができました（赤矢印）。加工が完了したら [ボクセル加工] を閉じます。

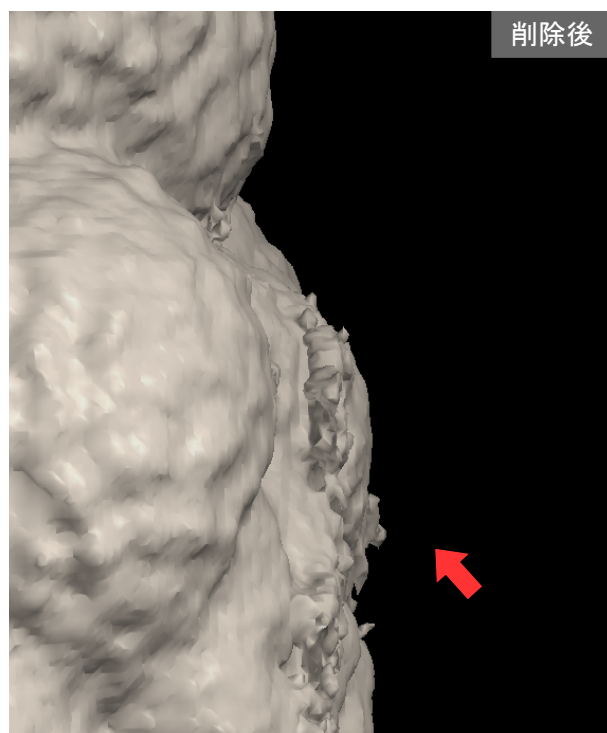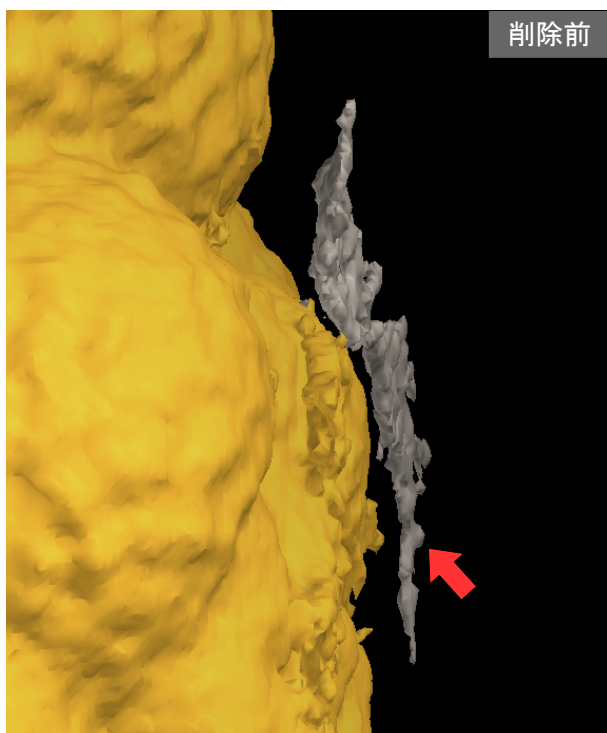

[ファイル(F)] から [molcer file を保存(S)] を実行し、保存します。

